

Verstehen,
was Menschen
brauchen.

Antidekubitus-
matratze
EVOBA

FACTSHEET

Antidekubitusmatratze EVOBA



Hervorragende Druckentlastung


Die 5-Zonenoberflächen-Profilierung passt sich optimal dem Körper an. In Verbindung mit der viscoelastischen Mittelzonenverstärkung wird das Entstehen von Druckstellen vermindert.

Gute Stabilität


Die angebrachten Randzonenverstärkungen sorgen für die nötige Stabilität und dienen gleichzeitig als Aufstehhilfe.

Hygiene

Der Inkontinenz-Schutzbezug OBATEX BRAVO schützt die Matratze vor Feuchtigkeit und ist einfach zu reinigen. Der Bezug ist Wasserdampf durchlässig und resistent gegen organische Flüssigkeiten.

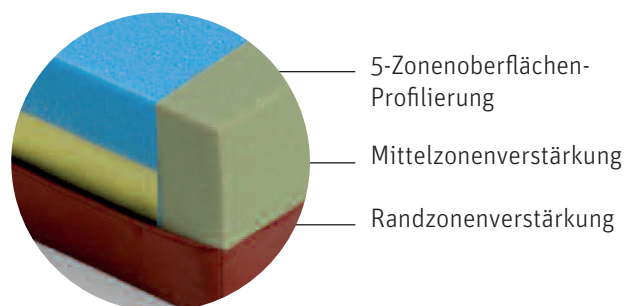

EvoPore HRC behält im Gebrauch seine extrem hohe Stabilität und hervorragende Stützkraft.

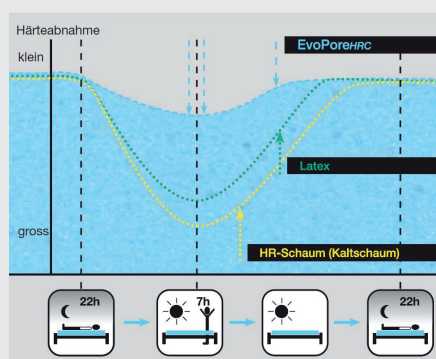

Härteabnahme der Matratze im Gebrauch

Härtegrad	weich – mittel
Dekubitusgrad	2
Patientengewicht	bis 150 kg
Grösse	Standard 90 x 200 cm alle Grössen erhältlich
Höhe	15 cm
Matratzengewicht	14 kg
Raumgewicht	45 / 60 kg/m ³
Kern	Kombikern EvoPore-Mischporenschaum / SAF gelb
Längskantenverstärkung	50 kg/m ³
Handgriffe	auf Wunsch 4 oder 8
Bezug	Obatex BRAVO, rost, flammhemmend
Pflege	Bezug waschbar bis 95°C, tumblerfest
Garantie	Kern: 10 Jahre (ab 3. Jahr pro rata) Bezug: 2 Jahre
Swiss made	EN ISO 9001/2000