



Verstehen,  
was Menschen  
brauchen.

## Adipositas- matratze GORDOFLEX

FACTSHEET

# Adipositasmatratze GORDOFLEX



**Für Patienten und Bewohner mit einem Körpergewicht von bis zu 300 kg – inkl. Dekubitusprophylaxe**

## Extrem stabil

Die Kombination von extra starken Spezialstahlfedern, einem hochwertigen viscoelastischen Spezialschaumstoff und einer Mittelzonenverstärkung bietet extrem gute Stabilität.

## Beste Druckentlastung

Dank den drei Komfortzonen passt sich der Matratzenkern perfekt dem Körper an und sorgt für einen angenehmen Liegekomfort.

## Hygiene und Sicherheit

Die speziell konzipierte Randzonenverstärkung dient als Aufstehhilfe und garantiert bis zu einem Patientengewicht von 300 kg grosse Sicherheit. Der Inkontinenzschutzbezug Obatex DA schützt die Matratze vor Feuchtigkeit und ist einfach zu reinigen (erfüllt die Brandklasse A, Normen 12952 1 - 4).

## Liegefläche


Der MEMOBA-Duro-Schaumstoff sorgt auch bei sehr schweren Patienten für eine hervorragende Druckentlastung und bietet eine effiziente Dekubitusprophylaxe. So können auch Rücken-, Nacken- und Gliederschmerzen gelindert werden.

## Stahlfedern

Die Spezialstahlfedern (welche in einem hochwertigen Supra-HR-Schaum eingebettet sind) in Kombination mit einer Mittelzonenverstärkung bieten optimale Stabilität und stützen den Körper ideal.

## Randzonenverstärkung

Die Spezial-Randzonenverstärkung erhöht die Sicherheit und dient gleichzeitig als Aufstehhilfe.

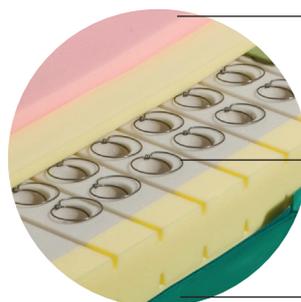

## Spezial-Handgriff



Der für GORDOFLEX entwickelte Handgriff für Matratzenschutzhüllen wird mit einer Spezialtechnik verarbeitet. Die Handgriffe halten auch extremen Beanspruchungen stand und ermöglichen somit eine schnelle Evakuation. Getestet und entwickelt mit der Betriebsfeuerwehr vom Kantonsspital Bruderholz/Basel. Diese Spezial-Handgriffe stellen wir gerne als Option her.

<b>Härtegrad</b>	hart
<b>Dekubitusgrad</b>	2 - 3
<b>Patientengewicht</b>	bis 300 kg
<b>Grösse Standard</b>	115 x 210 cm, alle Grössen erhältlich
<b>Höhe / Matratzengewicht</b>	19 cm / 23 kg
<b>Kern</b>	Spezial-3-Zonenmatratzenkern mit extra starken Stahlfedern (Drahtstärke 2.2/2.4/2.2), eingebettet in Polyether-Schaum, Liegefläche aus viscoelastischem Spezialschaumstoff MEMOBA Duro 60120 rosa
<b>Randzonenverstärkung</b>	RG 50
<b>Handgriffe</b>	auf Wunsch 4 oder 8, extra stark
<b>Bezug</b>	oberer Teil Obatex DA beige, flammhemmend unterer Teil Soflux grün, flammhemmend
<b>Pflege</b>	Obatex DA waschbar bis 95°C, tumblerfest Soflux abwaschbar
<b>Swiss made</b>	EN ISO 9001/2000