

Verstehen,
was Menschen
brauchen.

Antidekubitus-
matratze
HOSPISOFT

FACTSHEET

Antidekubitusmatratze HOSPISOFT



Beste Dekubitusprophylaxe – klinisch getestet

Höchster Liegekomfort

Keine Druckstellen; weniger schwitzen dank trockenem Bettklima; Sicherheit durch Randzonenverstärkung; kein Körpergefühlsverlust; gute Stützkraft

Gute Investition

Neu entwickelte Matratze für zufriedene Patienten und Heimbewohner; sehr langlebig und strapazierfähig; höchste Schweizer Qualität; gute Garantieleistungen durch OBA AG bzw. Bigla Care

Einfache Anwendung

Einfache Reinigung von Obatex DA Schutzbezug; keine Gefahr von Verwechslung – HOSPISOFT ist beidseitig nutzbar; für Dekubitusprophylaxe und als normale Matratze einsetzbar; geeignet für Heimbewohner bis 150 kg

Hygiene


Der Inkontinenz-Schutzbezug Obatex DA schützt die Matratze vor Feuchtigkeit und ist einfach zu reinigen. Der Bezug ist wasserdampfdurchlässig und resistent gegen organische Flüssigkeiten.

Druckentlastung

Der neu entwickelte Schaumstoffkern garantiert eine effiziente Dekubitusprophylaxe. Die Längs- und Querprofilierung sorgt für optimale Körperanpassung.

Sicherheit


Die beiden Längskanten bieten grosse Stabilität und dienen gleichzeitig als Aufstehhilfe. Die Mittelzonenverstärkung erhöht zudem den Liegekomfort.

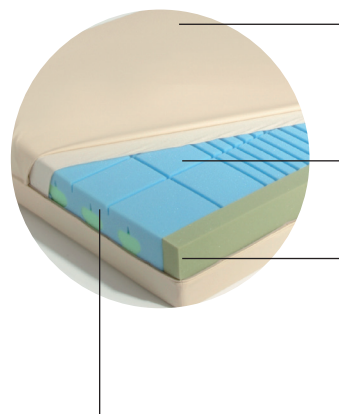

Weniger schwitzen

Die vertikalen und horizontalen Belüftungskanäle garantieren eine optimale Durchlüftung des Matratzenkerns. So entsteht ein angenehm trockenes Bettklima.

EvoPore HRC behält im Gebrauch seine extrem hohe Stabilität und hervorragende Stützkraft.

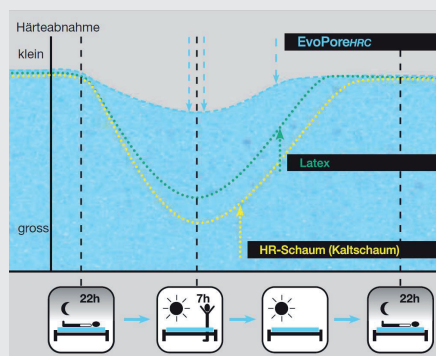

Härteabnahme der Matratze im Gebrauch

Härtegrad

weich – mittel

Dekubitusgrad

3

Patientengewicht

bis 150 kg

Grösse

Standard 90 x 200 cm
alle Grössen erhältlich

Höhe

15 cm

Matratzengewicht

13 kg

Raumgewicht

45 / 40 kg/m³

Kern

KEvoPore 7-Zonen-Mischsporenschaum

Längskantenverstärkung

50 kg/m³

Handgriffe

auf Wunsch 4 oder 8

Bezug

Obatex DA beige, flammhemmend
Brandklasse A, Normen 12952 1-4

Pflege

Bezug waschbar bis 95°C, tumblerfest

Garantie

Kern: 10 Jahre (ab 3. Jahr pro rata)

Bezug: 2 Jahre

Swiss made

EN ISO 9001/2000