

■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff

Funktional. Intelligent. Menschlich.

movita sc

Das Niedrigpflegebett als Basis für alle Anforderungen





movita sc | Die Basis für alle Anforderungen

Das Niedrigpflegebett movita sc ist nicht nur die Basis für alle Anforderungen in der Pflege, sondern die ideale wirtschaftliche Alternative in unserem Sortiment bei wissner-bosserhoff. Dieses vielseitige Pflegebett bietet eine umfangreiche Auswahl an Features und Ausstattungsoptionen, die sowohl Pflegekräfte als auch Bewohner gleichermaßen begeistern.

Mit dem neuen Handschalter und anderen innovativen Funktionen ermöglicht das movita sc komfortable Pflege und gewährleistet gleichzeitig höchste Produktsicherheit.

In dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die Eigenschaften und Vorteile des movita sc geben, mit denen Sie eine würdevolle Pflegeumgebung für Ihre Bewohner schaffen können.

Erfahren Sie, wie dieses Pflegebett Ihnen hilft, das optimale Preis-/Leistungsverhältnis zu erzielen, ohne Kompromisse beim Komfort und der Sicherheit einzugehen.

Entdecken Sie die Vielseitigkeit des movita sc und warum es die optimale Wahl für Alten- und Pflegeheime ist, die nach einer zuverlässigen Lösung suchen.

movita sc 310, extramobil, Design Df | links: Dekor Lindberg Eiche, Nachttisch vitalia 2 | unten: Dekor Sand Greige, Nachttisch vitalia 1

Starten Sie direkt mit unseren Produktvideos



Komfort für die Pflege
movita sc unterstützt bestmöglich eine würdevolle Pflege



Rundum sicher
movita sc bietet ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept, das Risiken für Bewohner und Pflege minimiert





Wohnidee Asturien | Design Dfx

Neues Uni-Dekor



- Trendfarbe Sand Greige, inklusive Holzmaserung
- Fügt sich harmonisch in fast jede Raumgestaltung ein



wissner-bosserhoff | movita sc



Wohnidee Mediterran | Design Df

wissner-bosserhoff | movita sc



Wohnidee Cornwall | Design Df

Im Überblick

Die wichtigsten Features des movita sc

- Komfortabel für die Pflege
- Effektive Sturzprävention
- Erweitertes Platzangebot im Beckenbereich
- Produktsicherheit

Die optionale LED-Leselampe sorgt für zusätzlichen Komfort.



4 | Ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept minimiert das Verletzungsrisiko und schützt vor Produktschäden.



5 | Ein optionaler Bed-Exit-Assistent bietet individuelle und fortschrittliche Sturzprävention.




1 | Die sichere Schlafhöhe von 25 cm minimiert das Risiko schwerwiegender Sturzfolgen.



2 | Die einzigartige Ergoframe®-Technologie (doppelter Rückzug) vergrößert das Platzangebot im Beckenbereich um 16 cm.

3 | Der neue Handschalter bietet automatische Pflegepositionen, die elektronisch ge- und entsperrt werden können. Die Hintergrundbeleuchtung und übersichtliche Gestaltung runden das Produkt ab.

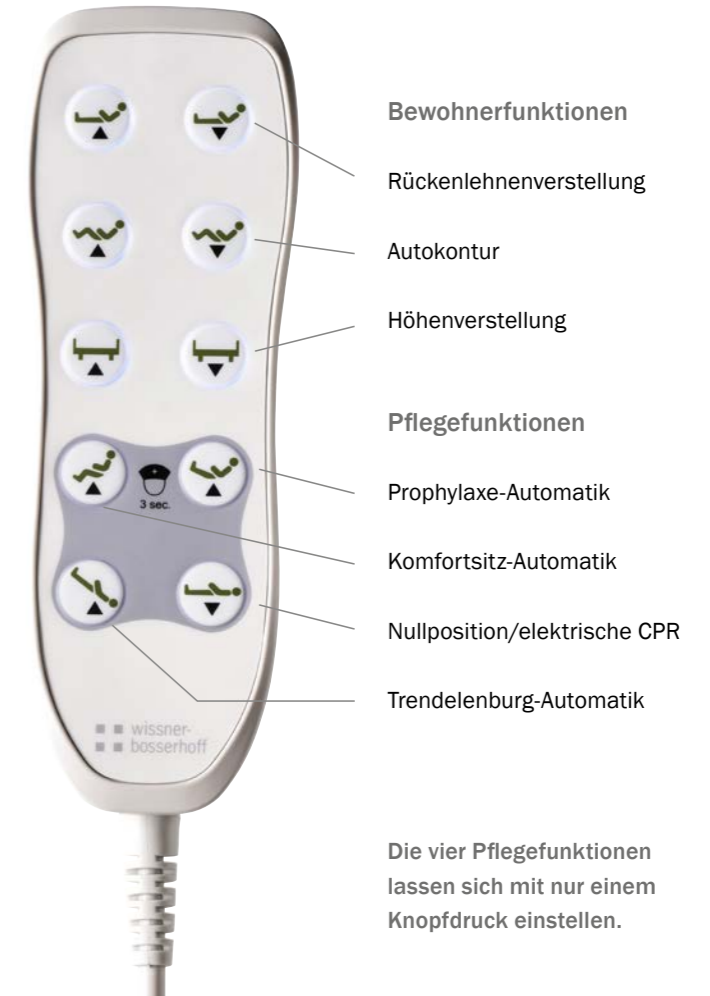

Die vier Pflegefunktionen lassen sich mit nur einem Knopfdruck einstellen.

Komfortabel. Intuitiv. Sicher.

Komfortabel für die Pflege

Unterstützung bei Mobilisierungsmaßnahmen und täglichen Pflegeaktivitäten

- Automatische Pflegefunktionen (Prophylaxe-Automatik, Komfortsitz-Automatik, CPR-Automatik/Nullposition, Trendelenburg-Automatik) mit nur einem Knopfdruck
- Ergonomische Pflegehöhe von 80 cm für rückschonendes Arbeiten
- Unterfahrbarkeit von 15 cm ermöglicht den Einsatz vieler Pflegehilfsmittel



Effektive Sturzprävention

Stürze werden mit zunehmenden Alter zum gesamtheitlichen Risiko

- Sichere Schlafhöhe von 25 cm minimiert das Verletzungsrisiko im Falle eines Sturzes
- SafeSense® Bed-Exit-System signalisiert dem Pflegepersonal, dass der Bewohner dabei ist, das Bett zu verlassen (inkl. einstellbarem Timer 0-30 Min.)
- Automatisches Nachtlicht durch das SafeSense®-System bietet zusätzliche Orientierung bei Nacht
- Bremssystem schützt vor unbeabsichtigtem Verahren des Bettes



Erleichterung für Pflege und Bewohner

Komfortable Betten verbessern die Lebensqualität der Bewohner und unterstützen die Pflege

- Einzigartige Ergoframe®-Technologie vergrößert das Platzangebot im Beckenbereich um 16 cm
- Ein breites Matratzenportfolio für unterschiedliche Bewohneransprüche
- Neues Uni-Dekor harmonisiert mit fast jeder Raumgestaltung
- Bed-Exit-System SafeSense® ermöglicht eine autonome Selbstmobilisierung
- Optionale Hussen (Stoff oder Kunstleder) für Kopf- und Fußteile sorgen für ein Plus an Wohnlichkeit
- Verlängerung der Liegefläche um 20 cm per Zubehör



Produktsicherheit

Unser Ziel: Minimierung von Risiken bei der Pflege von Bewohnern

- Intuitive und bewährte Bedienoberflächen
- Elektrische Sperrung für sensible Pflegefunktionen auf dem Handschalter
- Minimierung von Quetschstellen und keine gefährlichen Lücken
- Optimiertes Kabelmanagement (inkl. Kabellänge und Zugentlastung)



Zubehör

Digitale Pflegeassistenten als innovative und digitale Lösungen zur Unterstützung von individuellen Pflegeaktivitäten und komplexen Pflegeabläufen

SafeSense® | Bed-Exit-Assistent

Ihr Nutzen:

- Frühere Erkennung von Stürzen als durch Routinekontrollen
- Ein Nachtlicht gibt Orientierung im Dunkeln
- Höheres Sicherheitsniveau bei personell eng besetzten Nacht- und Wochenendschichten
- Schwesternruf mit flexiblem Timing
- Stand-Alone-Lösung mit separatem Netzanschluss



SafeSense® Bed-Exit-Assistent
Was bedeutet das eigentlich?



SafeSense® 3 | Digitaler Pflegeassistent

Ihr Nutzen:

- Echtzeit-Bewegungsmonitoring zur Erkennung von Dekubitusrisiken
- Bed-Exit-Monitoring mit bewohnerindividueller Einstellung
- Pflegemonitor-App bietet Übersicht über alle Daten
- Optionaler Feuchtigkeitsassistent zum besseren Schutz vor Mazeration und Dekubitus
- Stand-Alone-Lösung mit separatem Netzanschluss



SafeSense® 3
Der digitale Pflege-Assistent leicht erklärt!


Weitere Optionen

- Zentralbremse
- Mechanische Notabsenkung der Rücken- und Beinlehne
- 125 mm Einzelaufrollen mit Zentralfeststellung
- 100 mm Doppelaufrollen mit Zentralfeststellung
- 3/4 Seitensicherung (ab Oktober 2023)

Farben & Design



Sand Greige
U16001

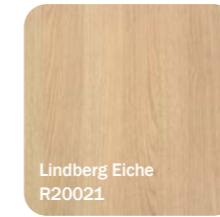

Lindberg Eiche
R20021



Altmühlbuche
R24006

Wir empfehlen ein Originalmuster für die endgültige Farbauswahl zu verwenden, da die Farben von den gedruckten Abbildungen abweichen können.



Design Df
Kopf-/Fußteil



Design Dfx
Fußteil flach



Design Ts
Kopfteil



Design Ts
Fußteil



Design Tsx
Fußteil flach

Technische Daten

Außenmaße, min./max.	90 x 205 / 99 x 205 cm
Liegefläche	90 x 200 cm
Matratzengröße	87 - 90 x 200 cm
Doppelter Rückzug (Ergoframe®)	16 cm mehr Platz im Beckenbereich
Höhenverstellung	25 - 80 cm
Fahrbarkeit	In jeder Betthöhe (höchste Flexibilität durch Fahrbarkeit in alle Richtungen)
Unterfahrbarkeit	15 cm
Bremsbarkeit	Einzelrollenfeststellung
Rollen	100 mm Einzelaufrollen
(Anti-) Trendelenburg, Schwenkung	ca. 12°
Sichere Arbeitslast	205 kg
Max. Bewohnergewicht	170 kg
Bettgewicht	ca. 80 kg (in Grundausstattung)
Schutzart	IPX4
Schutzklasse	II



wissner-bosserhoff GmbH

Hauptstraße 4-6 | 58739 Wickede (Ruhr) | Deutschland

Tel. +49 2377 784-0 | info@wi-bo.de | wi-bo.de



Bigla Care AG

Bernstrasse 3 | CH-3421 Lyssach | Schweiz

Tel. +41 31 700 92 00 | info@bigla-care.ch | www.bigla-care.ch

Members of LINET Group

