


■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff

Funktionale Eleganz in der Pflege



carisma 300 | 300-xxl

Komfort- und Schwerlastbetten

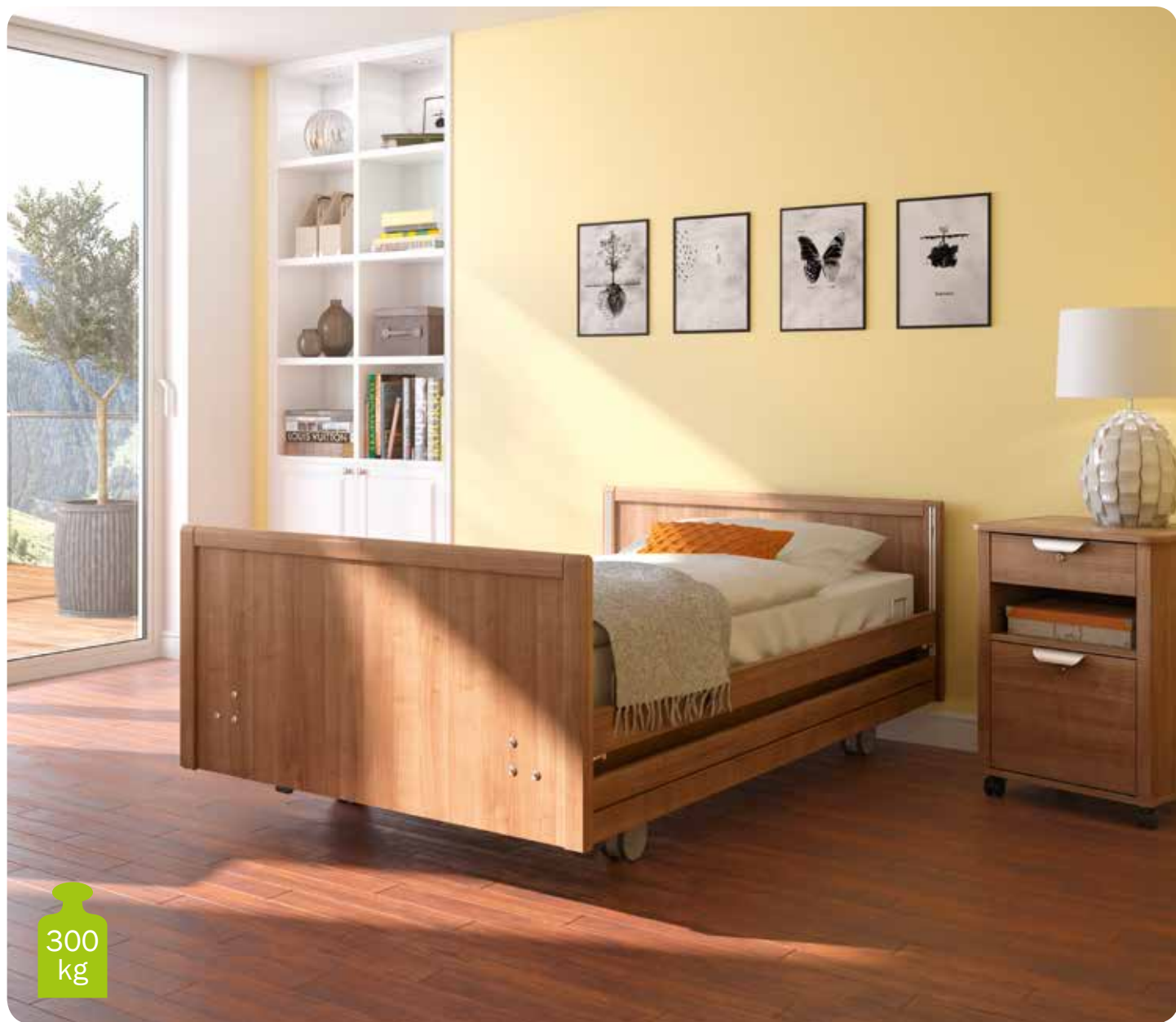

300
kg

Komfort- und Schwerlastbetten

carisma 300 | 300-xxl

Adipöse Bewohner haben einen besonderen Pflege- und Therapiebedarf. Hilfsmittel wie Bett oder Rollstuhl müssen dem Gewicht und der Größe des Bewohners angemessen sein, die Grundpflege dauert länger, es bedarf ggf. einer zusätzlichen Pflegeperson oder besonderen Hilfsmitteln bei der Pflege.

Das carisma 300 | 300-xxl berücksichtigt diese besonderen Anforderungen, genauso wie den individuellen Pflegekomfort, Wohnlichkeit und zusätzliche Funktionen, die den Pflegealltag für Bewohner und Pflegepersonal lebenswert gestalten.

- Sichere Arbeitslast von 300 kg für Bewohner bis zu einem Gewicht von 270 kg
- Beim carisma 300-xxl bietet eine extrabreite xxl-Liegefläche von 120 cm überdurchschnittlich viel Platz und Bewegungsfreiheit, was Druckstellen an den Extremitäten vorbeugt
- Ausreichend Platz für die Umlagerung, Mobilisation und die richtige Positionierung des Bewohners
- Ergonomisches und rückschonendes Arbeiten dank Pflegeposition
- Die Liegeflächenhöhe von nur ca. 36/37 cm ermöglicht eine gute Mobilisierung aus dem Bett

80 %

der über 70-jährigen sind übergewichtig

Rund 67 % der Männer und 53 % der Frauen sind übergewichtig (BMI >25), davon sind 23 % der Männer und 24 % der Frauen adipös (BMI >30)

Bei den über 70-jährigen liegt der Anteil der Übergewichtigen bei rund 80 %. Damit nimmt auch der Anteil adipöser, pflegebedürftiger Menschen weltweit stetig zu.

(Quelle: Robert Koch Institut 2012)



Entlastung durch unsere Schwerlastpflegebetten carisma 300 | 300-xxl

- Extrabreite Liegefläche von 120 cm
- Sichere Arbeitslast von 300 kg
 - Sehr stabil dank des extrabreiten Fahrgestells
 - Unterfahrbarkeit mit handelsüblicher Liftersystemen
- Leistungsstarke Motoren für Betthöhen-, Rücken- und Beinlehnenverstellung

Portfolio

Der belastbare Pflegeprofi



carisma 300

Fahrbarkeit

Im Bewohnerzimmer, in jeder Betthöhe

Rollen

50 mm Doppelaufrollen, vollständig durch wohnliches Chassis verkleidet

Bremsbarkeit

Achsweise Bremse

Sichere Arbeitslast

300 kg

Höhenverstellung

ca. 36 - 80 cm

Liegefläche

100 x 200/210/220 cm

Der belastbare & komfortable Pflegeprofi



carisma 300-xxl

Im Bewohnerzimmer und auf Stationen, in jeder Betthöhe

Linea 125 mm
Schwerlast-Doppelaufrollen

Zentrale Rollenfeststellung mit einer Richtungsrolle, beidseitig per Tritthebel

300 kg


ca. 37 - 80 cm

120 x 210 cm



Wohnkonzept

Material- und Farbauswahl greifen den aktuellen, natürlichen Wohntrend auf. So entsteht eine wohnliche, warme Atmosphäre, in der sich Bewohner aufgehoben und geborgen fühlen. Immer mehr Pflegeheime reagieren mit eigenständigen Wohnbereichen auf die zunehmende Zahl adipöser Bewohner. wissner-bosserhoff verbindet mit dem carisma 300 | 300-xxl das gewohnte Design mit der hohen Funktionalität zur Versorgung dieser Bewohner.

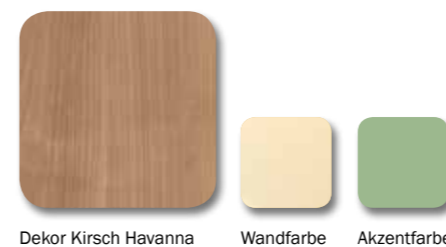

Dekor Kirsch Havanna Wandfarbe Akzentfarbe



Nachtisch vitalia 2



carisma 300-xxl, Design G09 3-fach

Vorteile

carisma 300 | 300-xxl



Abb. carisma 300-xxl

01



Sichere Arbeitslast 300 kg

- Max. Bewohnergewicht 270 kg
- 30 kg für Matratze und Zubehör

02

BiNetic-Liegefläche

mit doppeltem Rückzug:

- Echte Dekubitusprävention - mehr als nur eine sogenannte DBfK-Rückenlehne
- Ihr Plus: Reduktion der Beckenkompression sowie der Reibungs- und Scherkräfte durch Beinlehnen-Rückzug um 6 cm
- Rückenlehnenrückzug um 11 cm
- Bettinnenmaß:
carisma 300: 100 x 200/210/220 cm
carisma 300-xxl: 120 x 210 cm

03

Design-Handschalter

Verbesserte und erweiterte Funktionalität

- 3 Sicherheitsstufen einstellbar: Pflege, Bewohner- und Sicherheitsmodus
- Mobilisierungsfunktion
- Nachtlichtsteuerung
- Separate Beinlehnenverstellung
- Spielschutz

04

Fahrgestell

extra stabil durch:

- Ø 125 mm Schwerlast-Doppellaufrollen beim carisma 300-xxl
- Hohe Standfestigkeit
- Geringe Fußbodenbelastung
- Breiten Unterrahmen

05

Seitensicherung

- carisma 300: mit geteilten SafeFree® Seitensicherungen zur Unterstützung der Bewohnermobilität
- carisma 300-xxl: mit durchgehenden 3-fach Seitensicherungen für einen effektiven Schutz gegen Stürze
- Mit den meisten aktiven und passiven Matratzen kompatibel
- Hohe Bewohnersicherheit
- Leichte Bedienung beider Seitensicherungskonzepte

06

Bremsbarkeit

- carisma 300-xxl: zentrale Rollenfeststellung mit einer Richtungsrolle, beidseitig per Tritthebel
- carisma 300: achsweise Bremse

07

Höhenverstellung

- carisma 300-xxl: ca. 37 - 80 cm
- carisma 300: ca. 36 - 80 cm
- Sichere Mobilisierung ab 36/37 cm
- Optimale Pflegeposition bei 80 cm

Viel mehr als nur Schwerlastbetten

Die leistungsstarken Motoren für Betthöhen-, Rücken- und Beinlehnenverstellung entlasten spürbar die Pflegekräfte. Für individuellen Komfort und sicheres Aufrichten des Pflegebedürftigen in die Sitzposition sorgen einfache elektrische Verstellungen. Geteilte Seitensicherungen beim carisma 300 und durchgehende Seitensicherungen beim carisma 300-xxl geben dem Bewohner ein sicheres Gefühl. carisma 300 zeichnet sich dank der verkleideten Laufrollen durch seine hohe Wohnlichkeit aus. Das carisma 300-xxl steht mit seinen großen Schwerlast-Doppellaufrollen für hohe Bettmobilität. Beide Modelle besitzen ausreichende Unterfahrbarkeit für die Verwendung handelsüblicher Liftersysteme.



CB-Zertifikat



Prüfsiegel für Produkt-Zertifizierung und Auditierung

Das passende Zubehör (Optionen)

Matratze für carisma 300-xxl

- Hochwertige viskoelastische Schwerlastmatratze HeavyMatt 270
- Max. Bewohnergewicht von 270 kg
- Matratzenmaß: 205 x 114 x 18 cm
- Art.-Nr. 50-0701



Aufrichter HeavyHand

- Bis zu 100 kg belastbar
- Art.-Nr. 10-0857



Matratze für carisma 300

- Hochwertige viskoelastische Schwerlastmatratze CliniCare 30
- Max. Bewohnergewicht von 230 kg
- Matratzenmaß: 200 x 100 x 14 cm
- Art.-Nr. 50-0709



Schwerlast-Haltegriff

- Extra verstärktes Gurtband
- Art.-Nr. 10-0861 (ohne Abb.)

3D-Wandabweisrollen

- Horizontal und vertikal wirkend



Bettentransporter Typ A

- Universell einsetzbar
- Ermöglicht den Bettentransport durch schmale Türen
- Verzinkt
- Art.-Nr. 10-0511





■ ■ wissner- ■ ■ bosserhoff

Member of LINET Group

wissner-bosserhoff GmbH

Hauptstraße 4-6 | 58739 Wickede (Ruhr)

Tel.: +49 2377.784-0 | Fax: -163 | info@wi-bo.de | wi-bo.de



bigla
care

Bigla Care AG

Bernstrasse 3 | CH-3421 Lyssach | Switzerland

T +41 31 700 92 00 | info@bigla-care.ch | www.bigla-care.ch