

■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff



sella

Multifunktionsstuhl






Multifunktionalität, Mobilität & Mobilisation

sella – die Lösung für vielfältige Bereiche in Klinik und Pflege

Patienten und Bewohner sind in ihrer Bewegungsfähigkeit häufig sehr eingeschränkt. Die Gründe dafür sind vielfältig. Sie werden oft durch eine längere Krankheit - verbunden mit einem Klinikaufenthalt und/oder durch ein höheres Lebensalter verursacht. Die Folgen sind in vielen Fällen eine verminderte Kraft und eine eingeschränkte Beweglichkeit, die häufig zu einer Gangunsicherheit mit einer verbundenen Sturzgefährdung führen können.

Mit frühzeitigen Mobilisationsversuchen und bewegungsfördernden Maßnahmen in Klinik und Pflege sollen die Selbstständigkeit und Eigenaktivität gefördert, aber auch Folgeschäden - wie eine zunehmende Immobilität mit der Gefahr von Kontrakturen und Dekubitalulzera - deutlich reduziert werden. Ein erster Schritt zur Förderung der Mobilität kann ein Transfer vom Klinik-/Pflegebett in einen adäquaten Multifunktionsstuhl sein.

Der Multifunktionsstuhl sella ist mit Funktionen ausgestattet, die die Mobilität und Mobilisation fördern und sowohl Patienten/Bewohner als auch die Pflegekraft hinsichtlich Sicherheit, Ergonomie und Komfort optimal unterstützen. Daneben ist sella durch ausgezeichnete Fahreigenschaften für vielfältige Transport-/Transfersituationen innerhalb des Krankenhauses und/oder der Pflegeeinrichtung bestens geeignet.

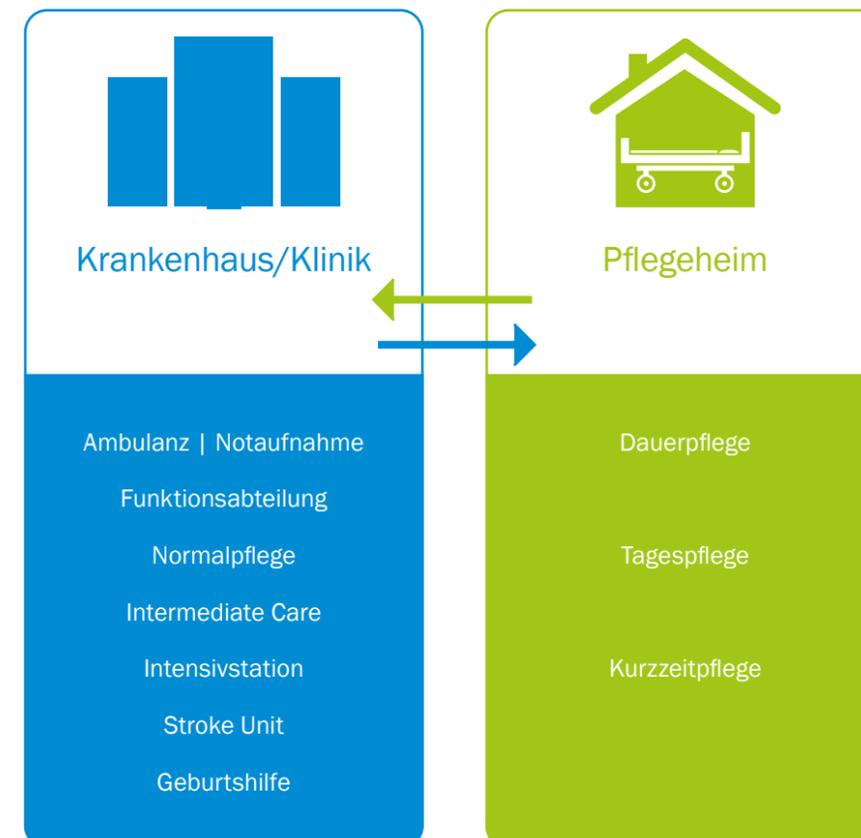


Flexibilität nach Bedarf & Anwendung



Sicherheit

- Komfortable, sichere Ein- und Ausstiegshöhe – Sturzprävention
- Passive und aktive Sicherheitselemente: Seitensicherungen, Armlehnen, Kopfkissen, Ablagetisch, Zentralbremse und Fußtritt
- Bedarfsgerechte Positionierung: Sitzen, Liegen und Ruhen

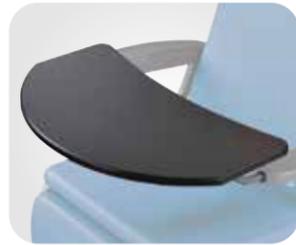

Einschiebbarer Tisch – Stärkung der Sitzposition und Förderung der Selbstständigkeit



Seitensicherung, gepolstert – sicherer Sitz- und Liegekomfort



Workflow-Optimierung


- Mobilität und Mobilisation in einem Produkt
- Umfangreiches Zubehör für Klinik und Pflege
- Unterstützung von Mobilisationsschritten unter ergonomischen Gesichtspunkten – Hubhydraulik für Höhe und Neigung der Sitzfläche



Komfortable Ruhe- und Schlafpositionierung bzw. Unterstützung bei Transfer- oder Untersuchungssituationen



Hubhydraulik zur Höheneinstellung mit Sitzflächenneigung für einen sicheren Ein- und Ausstieg des Patienten sowie eine rückenschonende Pflegeunterstützung.

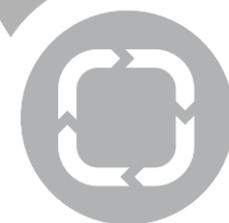

Prozessoptimierung



- Flexible Einsatzbereiche in Klinik und Pflege
- Umfangreiche Modellvarianten für den Innen- und Außenbereich
- Einfaches und sicheres Manövrieren in unterschiedlicher Umgebung



Outdoor
Maximaler Komfort für lange Wegstrecken oder für unebene Flächen durch große Fahrrollen



Indoor
Sicheres und einfaches Manövrieren auf kleinstem Raum durch kleine Fahrrollen vorn

Hygiene



- Abnehmbare, antimikrobielle Polster
- Infektionskontrolle durch leicht zu reinigende Flächen
- Einfache Entnahme der Sitzpolsterung



Infektionskontrolle durch einfache Reinigung der Polster Elemente

Portfolio

Einsatzgebiet	Outdoor 	Indoor 
Modell	 SLA-AX Festes Fahrgestell mit großen Vorderrollen	 SLA-DX Fahrgestell mit Hub und beweglichen Vorderrollen
Fahrbarkeit	2 große Fahrrollen vorne – für den Transfer im Freien	4 kleine Fahrrollen – für den optimalen Einsatz in kleinen Räumen
Maximales Patientengewicht	150 kg	150 kg
Abmessungen	Länge in Normalstellung	910 mm
	Länge in Liegestellung	1610 mm
	Breite	685/705 mm*
	Maximaler Hub (der Höhenverstellung)	205 mm
	Minimale Höhe	490 – 505 mm**
	Maximale Höhe	490 – 745 mm**
	Winkel Rückenlehnenverstellung	12° bis 70°
	Winkel Fußteilverstellung	12° bis 87°
	Winkel Armlehnenverstellung	-25°, 0°, 25°, 90°

Farbauswahl Standard

(Genaue Farbgebung nur über Dekormuster möglich.)



Baltic (008278)
Kunstleder



Apricot (008294)
Kunstleder



Creme (008291)
Kunstleder



Pink (8048)
Stoff



Perlweiß (6017)
Stoff

Sonderfarben

Gegen Aufpreis stehen weitere Farben zur Auswahl. (Genaue Farbgebung nur über Dekormuster möglich.)

Folgende Sonderfarben werden im Prospekt abgebildet:




Blau



Gelb

Zubehör

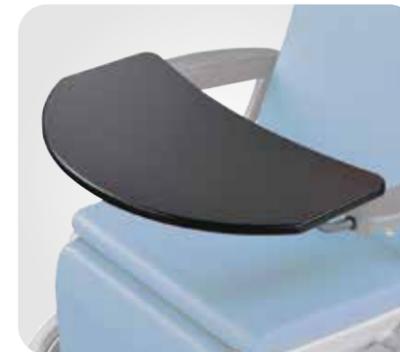

Tisch



Tisch mit Sicherheitsleiste



Tisch-Sicherheitsarretierung



Tischhalter



Teleskop-Infusionsständer



Halter für Infusionsständer



Aufbewahrungstasche



Urinbeutelhalter



Kopfstütze, groß



Seitensicherungen (Paar)



Rückenlehne unabhängig einstellbar



Beinlehne unabhängig einstellbar



  wissner-
  bosserrhoff

Member of LINET Group

wissner-bosserhoff GmbH

Hauptstr. 4-6 | D-58739 Wickede (Ruhr)

Tel.: +49 2377.784-0 | Fax: -163 | info@wi-bo.de | wi-bo.de



bigla
care

Bigla Care AG
Bahnhofstrasse 4, CH-3507 Biglen
T +41 31 700 92 00
info@bigla-care.ch, www.bigla-care.ch