

■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff

Funktionale Eleganz in der Pflege



Nachttische & Server

Klinik





Nachttische & Server

Für erkrankte Menschen ist es wichtig, einen Platz zu haben, der nur ihnen gehört – um persönliche Dinge aufzubewahren und wichtige Dinge gleich griffbereit zu haben. Eine Aufgabe, die Nachttische von wissner-bosserhoff als verlässlicher Partner im Pflegealltag erfüllen. Darüber hinaus unterstützen sie Patienten und Pflegepersonal bei den zahlreich anfallenden Tätigkeiten wie z. B. Essen oder Lesen. Der einfache Zugriff vom Bett unterstützt eine wirkungsvolle Sturzprävention. wissner-bosserhoff Nachttische ergänzen die Krankbetten harmonisch zu einer Einheit und erfüllen höchste Ansprüche optischen und funktionellen Designs.

Das Portfolio



stylo Serie
Design trifft Funktionalität
Seite 4 - 7



mano
Ergonomie im Fokus
Seite 8



classic Serie
Klassisch bewährt
Seite 9



Server
Flexible Mobilität
Seite 10 - 11

stylo Serie

Design trifft Funktionalität

Die stylo Nachttischserie kombiniert ein wohnliches Möbeldesign mit innovativen Funktionen und ermöglicht so praxisorientierte Produktvarianten.

Dank einer einzigartigen Mechanik lässt sich das Esstablett einfach ohne Werkzeug an beiden Nachttischseiten einsetzen.

Ein höherer Korpus gibt zusätzlichen Stauraum, und ein optionaler Kühlschrank lässt fast keine Wünsche mehr offen. Die Light Variante (LE) der stylo Familie hat eine fixierte Bettischplatte und ist beidseitig verwendbar. Durch die schmalere Außenmaße ist das Handling des Nachttisches sehr einfach.



stylo 3-LE

Die seitliche Drehbarkeit* der Bettischplatte um 25° ermöglicht die optimale Positionierung des Esstabletts für den Patienten, ohne den Nachttisch selbst bewegen zu müssen.



stylo 2

stylo 3

stylo 4

stylo 5



Die Konstruktion der LE-Variante ermöglicht eine beidseitige Verwendung dank durchschiebbarer Schubfächer.



Auf Wunsch wird das untere Schubfach durch eine Tür ersetzt. Der optionale Flaschenhalter sorgt für zusätzliche Ordnung.



Die kompakte Konstruktion und die separate 5. Rolle in der Variante mit Esstablett unterstützen die Sturzprävention dank außergewöhnlicher Stabilität und Kippsicherheit.



Softinzüge* (Option) bieten zusätzlichen Bedienkomfort für Patient und Pflegepersonal.



Robuste Schubladen mit integriertem Flaschenhalter sorgen für Ordnung. Durchgängige Griffe* garantieren eine einfache Erreichbarkeit auch vom Bett aus.



Mit Hilfe des leichten und werkzeuglosen Seitenwechsels (links/rechts) kann das Esstablett individuell an Patientenbedürfnisse und Raumgegebenheiten angepasst werden.*

stylo Serie

mit Kühlschrank

Die stylo Nachttischserie mit integriertem Kühlschrank überzeugt auch durch ihre inneren Werte. Der eingebaute Kühlschrank mit Flaschenbügel an der Innentür lässt keine Wünsche mehr offen. Er bietet dem Patienten einen besonders hohen Komfort.



Die höheren stylo Varianten bieten auch mit Kühlschrank ein geräumiges Zwischenfach.



stylo 2-k

stylo 3-k

stylo 4-k

stylo 5-k

Die Höhenverstellung und Drehbarkeit um 25° des Esstabletts ermöglichen eine optimale Positionierung.

Zusätzlicher Bedienkomfort für Patient und Pflegepersonal durch Softeinzüge.



Leichter und werkzeugloser Seitenwechsel der Bettischplatte (links/rechts).

Außergewöhnliche Stabilität und Kippsicherheit dank 5. Rolle und kompakter Konstruktion.

Der Kühlschrank ist mit 41l Fassungsvermögen sehr geräumig und eignet sich auch für große Flaschen.

mano

Ergonomie im Fokus

Der Nachttisch mano bringt wohnliches Ambiente ins Krankenzimmer. mano leistet von beiden Seiten gute Dienste und ist für den Patienten einfach arretierbar, denn die im oberen Bereich angebrachte Handbremse lässt sich mühelos vom Bett aus bedienen. Der Patient kann autonom agieren und den Nachttisch bewegen, was zur Entlastung des Pflegepersonals führt. Der seitliche Handtuchhalter ist mit Aufnahmen für Zubehör versehen. Schnell und einfach eingesteckt lassen sich Leselampen, Rufanlagen etc. integrieren. Der integrierte Betttisch verschwindet dezent und Platz sparend in einer Nische. Er ist schwenkbar und bietet mit einer diskreten Seitenleiste guten Halt für Zeitschriften und Bücher. mano bietet viele funktionelle Vorzüge und wirkt gleichzeitig elegant.



Die am Tischblatt angebrachte Handbremse ist einfach und bequem vom Patienten zu bedienen.



Die Schuhablage gehört bei mano zur serienmäßigen Ausstattung.



Das Schubfach mit integriertem Flaschenhalter ermöglicht den leichten Zugriff aus dem Bett und beugt so Stürzen vor.



mano

classic

Klassisch bewährt: das Einsteigermodell

Die Nachttischserie classic ist die Budget schonende Einstiegsklasse im wissner-bosserhoff Nachttisch-Portfolio. Die classic Modelle überzeugen durch bewährte Details. Die hochwertige Oberflächenlackierung, das abgerundete Tischblatt und die harmonisch integrierten Galerieleisten geben dem Nachttisch seinen unverwechselbaren Charakter. Beidseitig praktisch: die Schubladen, das Zwischenfach und das untere Fach lassen sich von beiden Seiten bedienen. Der Nachttisch classic 1 verfügt zusätzlich über einen ausklappbaren Betttisch. Die Rollen sind mittels Fußbremse feststellbar und lassen sich auch bequem wieder lösen.



classic 1



classic 2

Mit einem höhenverstellbaren Betttisch bietet der classic 1 individuellen Komfort für den Patienten. Der Nachttisch classic 2 verzichtet auf den integrierten Betttisch und wartet dafür mit einem praktischen Zeitschriften- und Flaschenhalter auf.



Der seitlich angebrachte Handtuchhalter sorgt für Ordnung.



In der Innentür des großen Staufaches kann optional ein Flaschenkorb eingehängt werden. So fällt garantiert nichts um.



Die Alternative zum Staufach: eine große Schublade mit integriertem Flaschenhalter sorgt für Ordnung und gute Erreichbarkeit auch vom Bett aus.

Server

Flexible Mobilität

Durch seine hohe Mobilität ist der Server ein praktischer Wegbegleiter im Pflegealltag. Je nach Bedarf kann er an den Nachttisch, das Bett oder an Armlehnenstühle, Transport- und Rollstühle herangeschoben werden. Dabei dient er vor allem als Tischersatz. Überzeugend die praktische Einhandbedienung.



stylo S3

Der höhenverstellbare und schwenkbare Betttisch ermöglicht eine flexible Anpassung an verschiedene Einsatzmöglichkeiten wie Essen oder ergonomische Ablage beim Lesen.



stylo S3T

Die Patienten profitieren von einer zweiten zusätzlichen Ablagefläche, die fixiert ist und nicht separat verstellt werden kann. So ist es möglich, z.B. gleichzeitig zu lesen und Kaffee zu trinken.








solido 2

Der vergrößerte Betttisch erhöht den Komfort auch für Patienten, die das Bett nicht verlassen können. Eine Rutschsicherung stützt Dokumente und Bücher oder verhindert das Mitreißen von Gegenständen, wenn der Betttisch lateral geschwenkt wird. Der solido 2 ist auch mit fixierter Betttischplatte erhältlich.








Sortimentsübersicht

stylo Nachttische

					
	stylo 2	stylo 2-LE	stylo 2-k	stylo 3	stylo 3-LE
Höhenverstellbare Betttischplatte	-	-	-	✓	✓
Drehbare Betttischplatte	-	-	-	○	-
Beidseitig verwendbar	-	✓	-	✓	✓*
Handbremse am Tischblatt	-	-	-	-	-
Anzahl Schubladen	2	1**	1	2	1**
Anzahl Türen	0	1	1	0	1
Softeinzug für Schubladen	○	-	○	○	-
Integrierter Kühlschrank	-	-	✓	-	-
Geräumiges Zwischenfach	✓	✓	-	✓	✓
Abmessungen (BxHxT) <small>Eingeklappte Betttischplatte</small>	52 x 83 x 47 cm	45 x 84 x 47 cm	52 x 83 x 50 cm	69 x 83 x 47 cm	58 x 84 x 47 cm
Höhe der Betttischplatte	-	-	-	ca. 78 - 114 cm	ca. 76 - 108 cm
Maße der Betttischplatte	-	-	-	ca. 57 x 37,5 cm	ca. 57 x 37,5 cm
Stufenweise schwenkbar	10 Stufen á 36°	-	-	10 Stufen á 36°	10 Stufen á 36°
Belastung der Betttischplatte	15 kg mittig	-	-	15 kg mittig	15 kg mittig
Gesamtgewicht Nachttisch	ca. 30 kg	ca. 28 kg	ca. 42 kg	ca. 39 kg	ca. 38 kg

stylo Nachttische

					
	stylo 3-k	stylo 4	stylo 4-k	stylo 5	stylo 5-k
Höhenverstellbare Betttischplatte	✓	-	-	✓	✓
Drehbare Betttischplatte	○	-	-	○	○
Beidseitig verwendbar	✓	-	-	✓	✓
Handbremse am Tischblatt	-	-	-	-	-
Anzahl Schubladen	1	2	1	2	1
Anzahl Türen	1	0	1	0	1
Softeinzug für Schubladen	○	○	○	○	○
Integrierter Kühlschrank	✓	-	✓	-	✓
Geräumiges Zwischenfach	-	✓	✓	✓	✓
Abmessungen (BxHxT) <small>Eingeklappte Betttischplatte</small>	69 x 83 x 50 cm	52 x 93 x 47 cm	69 x 93 x 50 cm	69 x 93 x 47 cm	69 x 93 x 50 cm
Höhe der Betttischplatte	ca. 78 - 114 cm	-	-	ca. 78 - 114 cm	ca. 78 - 114 cm
Maße der Betttischplatte	ca. 57 x 37,5 cm	-	-	ca. 57 x 37,5 cm	ca. 57 x 37,5 cm
Stufenweise schwenkbar	10 Stufen á 36°	-	-	10 Stufen á 36°	10 Stufen á 36°
Belastung der Betttischplatte	15 kg mittig	-	-	15 kg mittig	15 kg mittig
Gesamtgewicht Nachttisch	ca. 51 kg	ca. 31 kg	ca. 43 kg	ca. 40 kg	ca. 52 kg

classic & mano Nachttische


			
	classic 1	classic 2	mano
Höhenverstellbare Betttischplatte	✓	-	✓
Drehbare Betttischplatte	-	-	-
Beidseitig verwendbar	✓	✓	✓
Handbremse am Tischblatt	-	-	✓
Anzahl Schubladen	1**	1**	2
Anzahl Türen	1	1	○
Softeinzug für Schubladen	-	-	-
Integrierter Kühlschrank	-	-	-
Geräumiges Zwischenfach	✓	✓	✓
Abmessungen (BxHxT) <small>Eingeklappte Betttischplatte</small>	52 x 87 x 50 cm	52 x 87 x 50 cm	51 x 93 x 49 cm
Höhe der Betttischplatte	ca. 72 - 108 cm	-	ca. 78 - 114 cm
Maße der Betttischplatte	ca. 60 x 34,5 cm	-	ca. 60 x 34,5 cm
Stufenweise schwenkbar	7 Stufen	-	7 Stufen
Belastung der Betttischplatte	9 kg mittig	-	9 kg mittig
Gesamtgewicht Nachttisch	ca. 52 kg	ca. 30 kg	ca. 35 kg

stylo & solido Server


				
	stylo S3	stylo S3T	solido 2	
Höhenverstellbare Betttischplatte	✓	✓	✓	✓
Schwenkbare Betttischplatte	✓	✓	✓	-
Fixierte Betttischplatte ohne Schwenkung	-	-	-	✓
Feststehendes Tabletteil	-	✓	✓	-
Verlängerte Betttischplatte	-	-	✓	✓
Abmessungen (BxT)	83 x 43 cm	95 x 43 cm	99 x 45 cm	96 x 45 cm

Farben & Dekore*

Uni- und Holzdekore

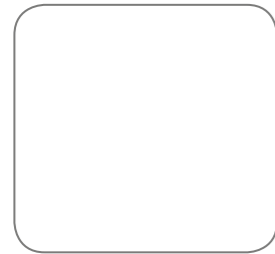

Reinweiß

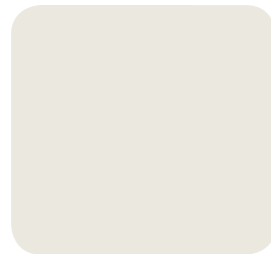

Perlweiß



Hellgrau



Rosé



Mandarine



Himmelblau



Mintgrün



Anisblume



Weißahorn



Honigbuche



Calvadosbirne



Zebrano


Unidekore Server



Weißgrau
(nur in Verbindung
mit RAL 9002)



Kitt
(nur in Verbindung
mit RAL 9006) Server

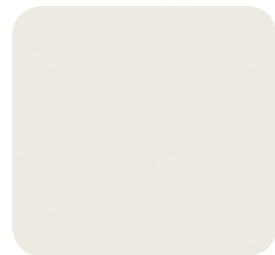

RAL 9002 Grauweiß



RAL 9006 Weißaluminium

RAL-Farben (Metallteile)



Foto: René Schwerdtel für wissner-bosserhoff



■ ■ wissner- ■ ■ bosserhoff

Member of LINET Group

wissner-bosserhoff GmbH

Hauptstraße 4-6 | 58739 Wickede (Ruhr)

Tel.: +49 2377.784-0 | Fax: -163 | info@wi-bo.de | wi-bo.de



bigla
care

Bigla Care AG

Bernstrasse 3 | CH-3421 Lyssach | Switzerland

T +41 31 700 92 00 | info@bigla-care.ch | www.bigla-care.ch