



Comprendre
ce dont chacun
a besoin.

Matelas
adipositas
GORDOFLEX

FACTSHEET

Matelas adipoitas GORDOFLEX



**Pour patients et résidents avec un poids jusqu'à 300 kg
– prévention des escarres comprise**

Extrêmement résistant

La combinaison de ressorts en acier spéciaux et d'une mousse visco-élastique spéciale de haute valeur avec partie centrale renforcée, apportent une très grande stabilité.

Allègement remarquable des pressions

De par ses 3 zones de confort, le noyau du matelas s'ajuste parfaitement au corps et assure ainsi un confort de couchage agréable.

Hygiène et sécurité

Les bordures renforcées spécialement conçues facilitent le lever et garantissent une grande sécurité pour des patients d'un poids de 300 kg. La housse de protection contre l'incontinence Obatex DA protège le matelas contre l'humidité. Elle est facile à nettoyer (remplit les normes anti-feu classe A, 12952 1 - 4).

Surface de couchage


La mousse MEMOBA-Duro apporte même aux patients très lourds un allègement remarquable des pressions et assure une prévention efficace des escarres. Ainsi, les douleurs dorsales, celles au niveau de la nuque ou autres peuvent être soulagées.

Ressorts en acier

Les ressorts spéciaux en acier (lesquels sont insérés dans une mousse Supra-HR de grande qualité), en combinaison avec une partie centrale renforcée, apportent une stabilité optimale et soutiennent le corps idéalement.

Bordure renforcée

La bordure spécialement renforcée augmente la sécurité et sert en même temps à faciliter le lever de la personne.

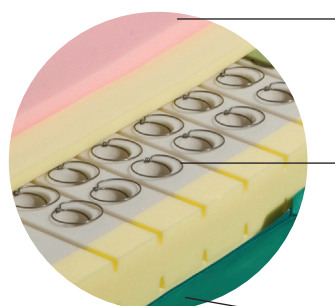

Poignée spéciale



La poignée spéciale conçue pour la housse de protection du GORDOFLEX a été traitée avec un procédé spécial. Ainsi, les poignées résistent même à des sollicitations extrêmes et permettent de ce fait une évacuation rapide. Ces poignées ont été testées et développées en collaboration avec les pompiers de l'Hôpital Cantonal Bruderholz/Bâle. Sur demande, nous fabriquons volontiers de telles poignées.

| | |
|---------------------------------|--|
| Degré de fermeté | ferme |
| Degré de décubitus | 2 - 3 |
| Poids du patient | jusqu'à 300 kg |
| Grandeur standard | 115 x 210 cm, toutes grandeurs disponibles |
| Hauteur/Poids du matelas | 19 cm/23 kg |
| Noyau | noyau spécial à 3 zones avec des ressorts en acier très solides (épaisseur des fils métalliques 2.2/2.4/2.2) intégrés dans une mousse polyéther, surface de couchage mousse viscoélastique spéciale MEMOBA Duro 60120 rose |
| Bordure renforcée | 50 kg/m ³ |
| Poignées | sur demande 4 u 8, très solides |
| Housse | dessus Obatex DA beige, dessous Soflux vert, difficilement inflammable |
| Entretien Obatex DA | lavable jusqu'à 95 °C, adaptée sèche-linge |
| Entretien Soflux | lavable avec un chiffon humide |
| Swiss made | EN ISO 9001/2000 |