

Comprendre
ce dont chacun
a besoin.

Matelas
prévention
d'escarres
EVOBA

FACTSHEET

Matelas prévention d'escarres EVOBA



Réduction optimale des pressions


Les 5 zones profilées à la surface s'adaptent parfaitement au corps. En relation avec la partie médiane en mousse viscoélastique à mémoire de forme, la formation de points de pression est ainsi réduite.

Bonne stabilité


Les bordures renforcées apposées garantissent une bonne stabilité et facilitent en même temps le lever du patient.

Hygiène

La housse de protection contre l'incontinence Obatex Bravo protège le matelas contre l'humidité. Elle est facile à nettoyer, imperméable aux liquides mais perméable à la vapeur d'eau.

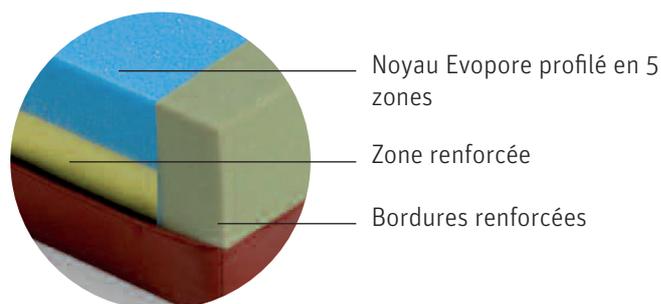

EvoPore HRC garde sa très grande stabilité et son haut pouvoir de soutien durant la nuit.

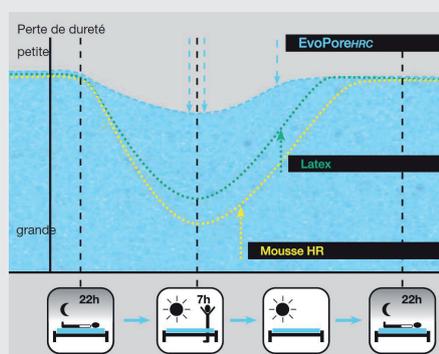

Diminution de la dureté du matelas en usage.

Degré de fermeté

tendre – moyen

Degré de décubitus

2

Poids du patient

jusqu'à 150 kg

Grandeur standard

90 x 200 cm, toutes grandeurs disponibles

Hauteur

15 cm

Poids du matelas

14 kg

Densité

45 / 60 kg/m³

Noyau

Mousse EvoPore combinée avec mousse à mémoire de forme SAF jaune

Bordures latérales renforcées

50 kg/m³

Poignées et housse

sur demande 4 ou 8, Obatex BRAVO, rouille, difficilement inflammable
housse lavable à 95°C

Entretien

adaptée au sèche-linge

Garantie

noyau: 10 ans (dès le 3^e année pro rata)

housse: 2 ans

Swiss made

EN ISO 9001/2000