



Comprendre
ce dont chacun
a besoin.

sentida 6-d
lit de soins bas
démontable

FACTSHEET

sentida 6-d – le démontable



Le lit de soins bas sentida 6-d de wissner-bosserhoff est démontable et, bien sûr, remontable en un temps record, ce quasiment sans outils, par une seule personne. De plus, aucune pièce ne pesant plus de 18 kg, toutes les exigences légales en matière de protection du travail sont respectées.

Le sentida 6-d trouve son application dans les soins à domicile ou encore dans les maisons de soins aux portes étroites et ce, sans restrictions en matière de design, de qualité ou de stabilité !



Prévention des chutes lors des phases de sommeil grâce à la position basse, mobilisation sûre à hauteur de siège et hauteur de soins optimale pour les proches et le personnel soignant : ce sont là les avantages du SVI. SVI = Le Système de Verticalité Intelligente possède non seulement une importante amplitude de 27 à 80 cm en hauteur, mais également une protection anticollision lors du réglage d'une position « Assise confortable » grâce à une commande intelligente.

Ce lit est disponible dans différentes configurations et avec divers accessoires. Vous disposez par exemple de trois options de sommiers, partant d'un sommier très mobile assurant un bon confort de couchage grâce à 55 éléments de suspension, en passant par un sommier particulièrement facile à nettoyer, jusqu'à un sommier à grille qui assure une bonne aération.

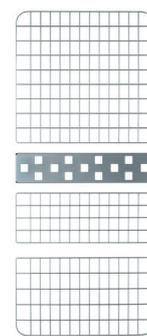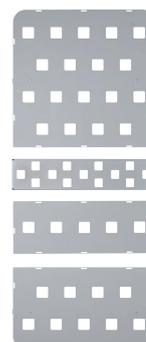

sentida 6-d – le démontable



Deux barrières latérales de sécurité modulaires sur chaque côté. Elles sont réglables individuellement et aident à la mobilisation, de même qu'à la prévention des chutes.


Toutes les variantes de lit disposent d'un système dit de double translation, qui non seulement règle le relève-buste, mais éloigne aussi le repose-jambe de l'assise, augmentant par là-même la surface du lit (17 cm de place en plus dans le lit). Des mesures des points de pression prouvent que, ce faisant, la charge est beaucoup moins importante et que cela contribue à la prévention des escarres.

En position « Fauteuil confort automatique », le lit se met dans la position prédéfinie, laquelle est parfaitement adaptée pour lire, manger et communiquer d'égal à égal de manière confortable.

Le choix des matériaux et des couleurs reflète la tendance actuelle et naturelle de l'habitat. Cela crée une atmosphère familiale et rafraîchissante, dans laquelle vous vous sentez et entre de bonnes mains et en sécurité.

Différents décors et couleurs sont disponibles conformément aux illustrations.

Vous avez également un large choix de design pour le panneau de tête de lit et du pied de lit. Vous pouvez les consulter dans la vue d'ensemble proposée dans un prospectus séparé (cf. note en dernière page).



Blanc nuage
(U11502)



Bouleau de Lund
(R35018)



Chêne de Lindberg
(R20021)



Pin cottage
(R55023)



Pin finlandais gris
(R55022)



Pin finlandais brun
(R55021)



Merisier havane
(R42006)



Acacia foncé
(R38006)



Hêtre naturel
(R24015)



Hêtre
(R24034)



Merisier
(R42002)

sentida 6-d – le démontable



SafeLift – Petite poignée originale

Le nouvel assistant de mobilisation SafeLift® révolutionne la commande de votre lit de soins. Il vous permet de régler la hauteur du lit, de même que la position du relève-buste.

Contrairement aux commandes manuelles conventionnelles, SafeLift fonctionne sans câbles ni batteries, et offre ainsi une vraie plus-value en matière de prévention des chutes et leurs coûts afférents. Sa forme ergonomique offre une prise sûre pour se relever et pour s'appuyer sur une, voire deux mains.

Grâce aux touches fluorescentes SafeLift reste une aide fiable également une fois la nuit tombée.

L'essentiel en bref

Position « fauteuil confort automatique » pour lire, manger, communiquer

Double translation et repose-jambe = prévention des escarres grâce à une pression réduite et décongestion lors de pathologies veineuses

Surface de couchage 87 x 200 cm

Robuste et sûr (moteur puissant pour un poids maximum jusqu'à 255 kg – selon le matelas et les accessoires)

Énergétiquement performant

Certificats de sécurité du fabricant garantis

Disponible pour les particuliers chez l'un des **partenaires commerciaux spécialisés** de Bigla Care. Vous trouverez des informations détaillées dans la brochure sur l'ensemble de la gamme de produits sentida – via nos partenaires commerciaux spécialisés ou électroniquement sur [notre site Internet](#).

