

■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff



Lits pédiatriques | De la naissance à l'adolescence



Nos petits patients nous tiennent à cœur

Portefeuille de lits pédiatriques

Il est compliqué de prendre soin d'un enfant malade : il ne se sent pas bien et est arraché à son environnement familial. Grâce à ce modèle adapté aux enfants, nous conférons à nos petits patients un sentiment de sécurité en leur offrant une atmosphère ludique pour favoriser leur bien-être et leur guérison.

Découvrez notre portefeuille de lits pédiatriques, de l'accouchement à l'adolescence.



Pages
6 - 7



Pages
9 - 11

Pages
12 - 13



Lit enfant à réglages entièrement électriques

avec système de sécurité à 360° | tom 2

Les lits enfants modernes pour patients d'âge préscolaire doivent être à la fois sûrs et facilement accessibles par le personnel soignant. Le lit pour enfant tom 2, à réglage électrique, répond à ces critères et à d'autres besoins des patients et des soignants grâce à son concept original de protections latérales télescopiques, son système de colonnes de levage et ses normes de sécurité exigeantes.



De 6 mois
à 4 ans
jusqu'à 100 cm

Recommandé pour les enfants

Avec ses lignes claires, ses matériaux modernes et ses couleurs vives, le lit tom 2 offre une atmosphère agréable aux jeunes patients comme à leurs parents.

Panneaux transparents pour une bonne vue d'ensemble

Grâce aux panneaux de lit transparents, les jeunes patients peuvent toujours observer leur environnement, ce qui facilite aussi le contact avec les parents et le personnel soignant. Les motifs colorés des panneaux sont adaptés à l'univers ludique des enfants.

Réglage électrique

La hauteur du lit, la position du relève-buste et la position Trendelenburg/anti-Trendelenburg peuvent être réglés au moyen d'une télécommande.

Pour régler le lit, il faut actionner la touche GO, ce qui permet de limiter les risques d'erreurs et d'éviter que les enfants ne jouent avec la télécommande.

Le système de colonnes de levage est l'une des principales caractéristiques d'équipement du lit, il permet un réglage en hauteur en temps réel. Il offre une stabilité et une hygiène parfaites, et permet de passer facilement sous le lit pour le nettoyage et l'entretien.





Équipement pour les soins intensifs


tom 2



Ensemble d'accessoires utiles

Quelques détails et accessoires pratiques viennent parachever le concept de prise en charge du tom 2 et peuvent être sélectionnés individuellement pour équiper le lit :

- 01 Veilleuse
- 02 Support pour accessoires ou tablette pour linge
- 03 Rail pour accessoires
- 04 Tige à perfusion télescopique intégrée
- 05 Réglage RCP manuel
- 06 Mini-superviseur
- 07 Renforcement pour alimentation ou évacuation

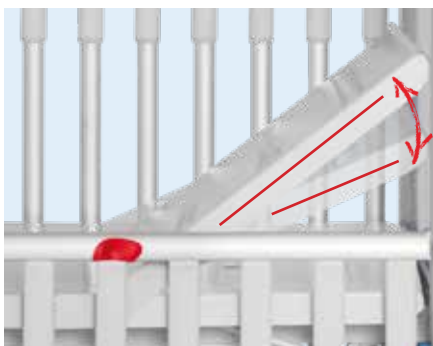

Sans interstice

- Grâce au repli automatique, l'espace est toujours réduit au minimum entre le relève-buste et la tête du lit, sans interstice dangereux
- Les principes de positionnement ergonomique du patient sont respectés



Protections anti-escalade

- Protection unique et design attrayant
- Version plus éthique que les lits à barreaux



Ouverture dans la protection latérale

- Accès pratique pour les soins pédiatriques



Panneaux amovibles

- Pour un accès dégagé au patient
- Particulièrement adapté aux soins intensifs
- Montants uniques à blocage magnétique




Réglage en hauteur confortable

- Grande plage de réglage
- Manipulation sans effort, ergonomique et sécurisée
- Position optimale pour les visites réglable

Protections latérales télescopiques uniques

- Structure en aluminium très légère
- 3 hauteurs de barrière (0 - 40 - 80 cm)
- Garde au sol de 13 cm

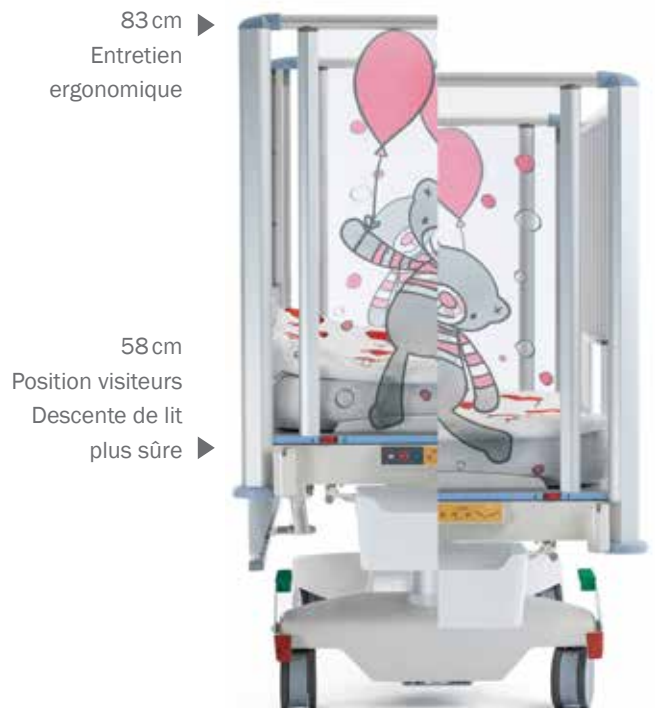

Vue d'ensemble pour sélection du produit



mimi

Nourrissons jusqu'à 15 kg



tom 2

Enfants de 6 mois à 4 ans
Taille : jusqu'à 100 cm



kit junior eleganza 2

À partir de 4 ans.
Taille de l'enfant : 90 cm minimum



Données techniques et électriques

Données techniques

	mimi	tom 2	kit junior eleganza 2
Dimensions	92 x 57 cm	160 x 83 cm	223 x 100 cm
Dimensions recommandées pour le matelas	65 x 35	142 x 70 cm	200 x 90 cm
Réglage en hauteur	64 - 94 cm	58 - 83 cm	39,5 - 77,5 cm
Position Trendelenburg/anti-Trendelenburg	14°/14°	15°/15°	16°/16°
Charge de travail sécurisée	20 kg	75 kg	250 kg



Members of LINET Group

bigla
care

Bigla Care AG
Bahnhofstrasse 4, CH-3507 Biglen
T +41 31 700 92 00
info@bigla-care.ch, www.bigla-care.ch

LINET spol. s r.o.

Želevčice 5 | 274 01 Slaný | Czech Republic
tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | e-mail: info@linet.com | www.linet.com

wissner-bosserhoff GmbH

Hauptstraße 4–6 | 58739 Wickede (Ruhr) | Allemagne
tel. : +49(0)2377/784-0 | fax : +49(0)2377/784-163 | e-mail: info@wi-bo.de | www.wi-bo.de