

Sella



Bien-être et autonomie

Les atouts de Sella



Pour votre
bien-être



- Indépendance et autonomie
- Confort
- Hauteur variable hydraulique pour une meilleure mobilité



Patient

- Grande maniabilité
- Légèreté et ergonomie
- Réduction des efforts physiques
- Accès au patient facilité



Personnel

- Réduit les efforts du personnel
- Améliore l'efficacité dans les services



Gestion

Une excellente mobilité

En plus de ses nombreuses fonctions, de ses qualités ergonomiques et de son design chaleureux, le fauteuil multifonctions Sella apporte de nombreux avantages aussi bien pour le patient que pour le personnel soignant.

Sa légèreté, sa bonne maniabilité et son assise confortable font de ce produit un excellent soutien dans tous les services hospitaliers ou d'hébergement.

Mobilité

Un fauteuil avec 2 grandes roues à l'avant est plus approprié pour un transport extérieur ou pour des sols irréguliers.





4 roues multidirectionnelles

Ces roues sont adaptées à une circulation dans les espaces plus petits ou étroits.



Grande maniabilité



Son poids raisonnable ainsi que son ergonomie font de Sella un fauteuil facile à manier.



Le frein central augmente la sécurité du patient et facilite l'utilisation pour le personnel soignant.

Aide à la mobilisation

Mobilisation

Le système d'aide au lever du fauteuil et la possibilité d'ajuster l'angle des accoudoirs évite tout effort physique du personnel médical qui est habituellement nécessaire pour aider le patient.



La mobilisation des patients est une des tâches les plus physiques dans le domaine des soins.



De plus, le fauteuil peut être automatiquement freiné lors de la prise d'appuie sur le marche pieds.

Fonctionnalités

Les nombreuses fonctionnalités du fauteuil permettent au patient d'être toujours confortable.



Autonomie

Le patient garde un maximum d'autonomie et d'indépendance.

Un bon positionnement pour un maximum de confort



Pour des soins efficaces



Le transfert

La hauteur variable permet un transfert du fauteuil au lit plus confortable pour le patient et rend le travail du personnel soignant plus simple.



Les soins

Il est également possible de l'utiliser pour un simple contrôle ou une prise de sang, en installant le patient en position assise sur le fauteuil.




Un accès simplifié

La structure du fauteuil Sella permet un accès au patient simplifié pour le personnel médical par exemple lorsqu'une échographie est nécessaire.

Les accessoires



Tablette

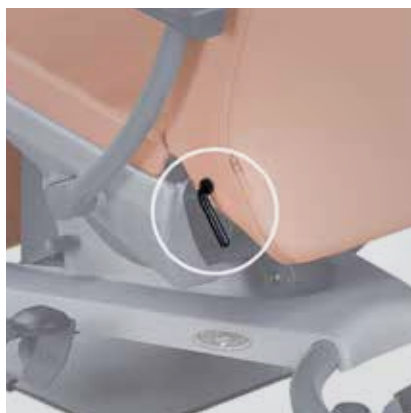

Mouvement du dossier indépendant



Mouvement du repose jambes indépendant



Demi-barrières



Pochette de rangement



Porte poche à urine



Repose-tête



Verrouillage de la tablette



Tablette avec galerie anti-chute



Support tablette



Tige à perfusion télescopique



Support pour TPS

Hygiène

La structure et les matériaux utilisés permettent un nettoyage facile sans efforts physiques.



Assise amovible



Nettoyage facile et rapide avec des produits désinfectants habituels.

Nuancier

Coloris standards



Rose



Bleu



Vert



Jaune



Orange



Violet

Les coloris spéciaux



Paramètres techniques

Model

SLA-AX		Châssis fixe et grandes roues à l'avant
SLA-BX		Châssis à hauteur variable et grandes roues à l'avant
SLA-CX		Châssis fixe et 4 roues multidirectionnelles
SLA-DX		Châssis à hauteur variable et 4 roues multidirectionnelles
SLA-IX		Châssis à hauteur variable avec aide au lever et grandes roues à l'avant
SLA-JX		Châssis à hauteur variable avec aide au lever et 4 roues multidirectionnelles
SLA-MX		Châssis à hauteur variable avec 4 grandes roues

Dimensions

Longueur totale en position assise	910 mm
Longueur totale en position couchée	1,610 mm
Largeur hors tout	685/705 mm*
Amplitude de la hauteur variable (si dispo)	205 mm
Hauteur d'assise mini	490 – 505 mm**
Hauteur d'assise maxi	490 – 745 mm**
Angle du relèvement buste	de 12 à 70°
Angle du repose-jambes	de 12 à 87°
Angles des accoudoirs	-25°, 0°, 25°, 90°

Poids maximal

Poids maximal du patient	150 kg
--------------------------	--------

* Accoudoirs standards / Accoudoirs confort

** En fonction du modèle



Sella

Patient

- Indépendance et autonomie
- Confort
- Hauteur variable hydraulique pour une meilleure mobilité



- Grande maniabilité
- Légèreté et ergonomie
- Réduction des efforts physiques
- Accès au patient facilité



Personnel

Gestion

- Réduit les efforts du personnel
- Améliore l'efficacité dans les services



LINET

Members of LINET Group

LINET FRANCE

7 rue Augustin Fresnel | 37170 Chambray-Lès-Tours | FRANCE

Tél. : 02 47 80 31 80 | Fax : 02 47 80 31 81 | E-mail: info@linet.fr | www.linet.fr

